

# 「アラーム音が鳴ったら」

点滅しているランプを確認し至急対処してください。



本体上面の「確認ランプ番号」もしくは、「タンク点検」「パッド交換」ランプを確認しましょう。

## ① 確認ランプ番号が点滅(尿を自動吸引できません)

	原因	対処方法
1	パッドと接続ケースが正しく接続されていません。	パッドと接続ケースを正しくセットしてください。
2	尿が自動吸引できていません。	尿タンク・水抜きタンク・吸引チューブと各配管接続部を点検し、パッドを交換してください。
3	尿タンクが満水です。	尿タンクを空にしてから <b>満水クリア</b> ボタンを押してリセットしてください。
4	水抜きタンクが満水、または正しくセットできていません。	水抜きタンクを空にして正しくセットしてください。

確認ランプ **5・9** は「本体取扱説明書」をご覧ください。

## ② タンク点検・パッド交換が点滅

	対処方法
● タンク点検 が点滅	尿タンク・水抜きタンクを点検し、各タンクを空にしてください。
● パッド交換 が点滅	パッドを交換してください。

**アラーム** **一時消音** ◀ アラーム音を一時的(10分間)に止める事ができます。

### ●お問い合わせ先

「ユニ・チャームいきいきダイヤル」(日本全国から無料でかけられます)

電話番号 **0120-041-062** (よいおむつ)

受付：月曜日～金曜日(祝日を除く)午前9時30分～午後5時 (病気についてのご相談はご遠慮ください)

※お手紙での場合は下記あてにお送りください。

〒108-8575 東京都港区三田 3-5-27 **ユニ・チャーム株式会社**「ユニ・チャームいきいきダイヤル」

尿吸引ロボ  
**Humany**  
ヒューマニー

## ② 上手にお使いいただくために

### CONTENTS


- 使用サイクル
- 肌ケアの方法
- 本体のお手入れ方法
- アラーム音が鳴ったら

# ヒューマニーを上手にお使いいただくためのステップ

## STEP

1

まずは「夜間」にご使用ください。

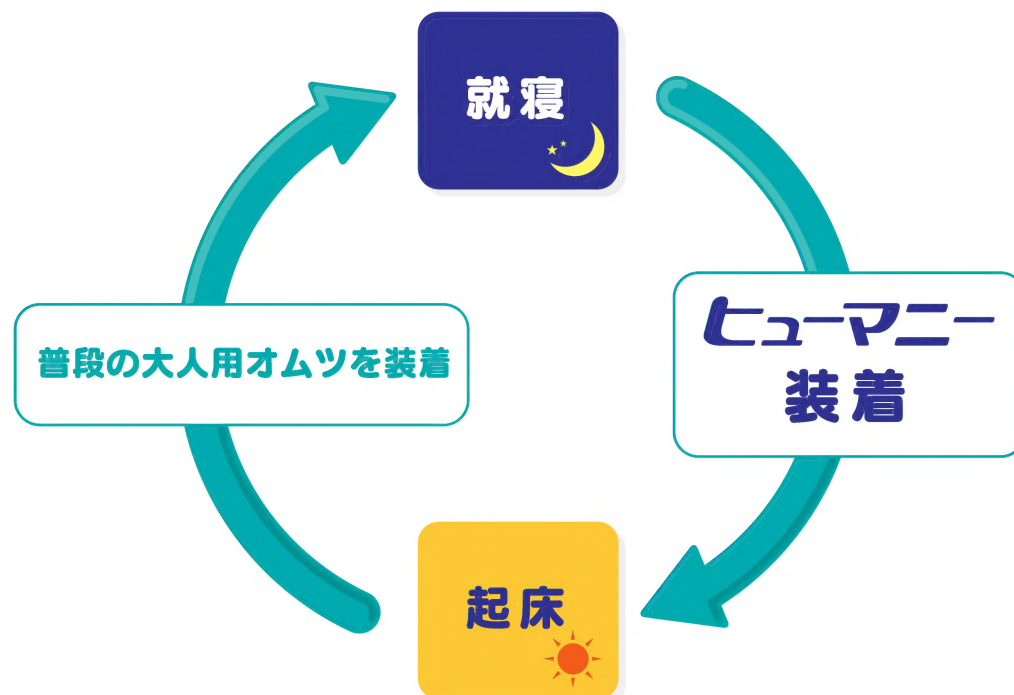

こんな事を実感してください

- 朝までお肌が濡れずにサラッとしている。
- 夜間の尿モレ回数が減ってとても楽になった。
- 夜間のオムツ交換がなくなり、ぐっすり熟睡できた。

## STEP

2

徐々に使用場面を増やしていきましょう。

- 日中、介護者が外出する時など（※12時間以内にケアを行ってください）

パッド交換時に「肌ケア」を行いましょう。


### 使用サイクル



就寝時

夜 21:00 (例)

パッドを装着します。

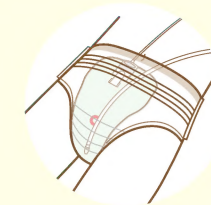


起床時

朝 7:00 (例)

パッドを交換します。

※普段の大人用オムツに戻します。

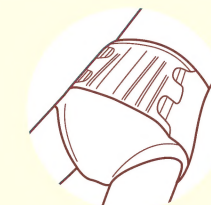

▶「肌ケア」を行います。

P3~4



### 12時間以上使用する場合

パッド装着後 12 時間経過したら、「肌ケア」と同時に「パッド洗浄」も行ってください。

※洗浄した尿吸引パッドを再び装着します。

▶「肌ケア」+「パッド洗浄」を行います。

※尿吸引パッドは使い捨てです。24 時間以上の使用、または交換済みパッドの再使用はおやめください。  
※尿タンクはこまめに点検し尿を捨てましょう。

### 日中使用時



朝 10:00 (例)

パッドを装着します。



夕方 17:00 (例)

パッドを交換します。

※普段の大人用オムツに戻します。

▶「肌ケア」を行います。



# 「肌ケア」の方法

パッドを交換する時行ってください。

準備する物品



●しき込み吸収シート



●濡れタオル




●洗浄液




●洗浄ボトル

●ヒューマニーおしり洗浄液の希釈方法  
適温（40℃前後）のお湯を 100ml あたり  
洗浄液 1プッシュ（3.5ml）の割合で適量  
溶かしてください。

## 1 伸縮ネットを脱がせます。

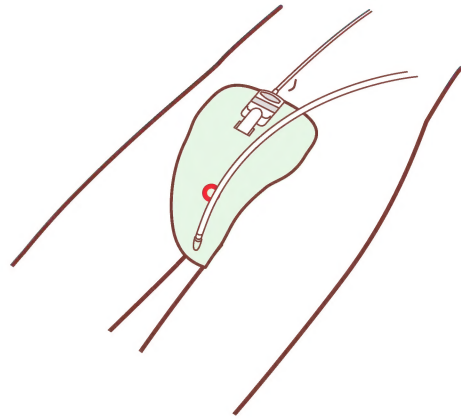

## 2 パッドを外し、しき込み吸収シートを敷きます。

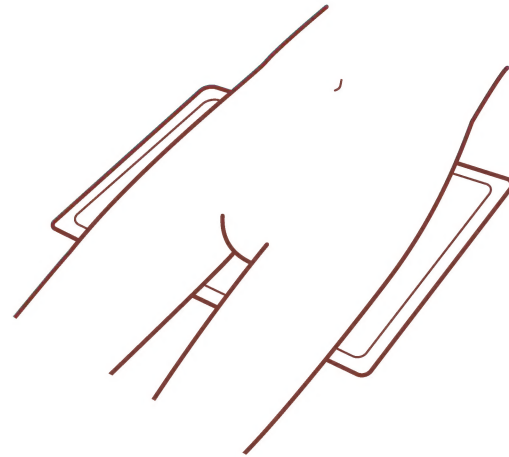


## 3 性器周辺を拭きます。



## 4 おしりを洗浄します。



## 5 普段の大人用オムツに交換します。

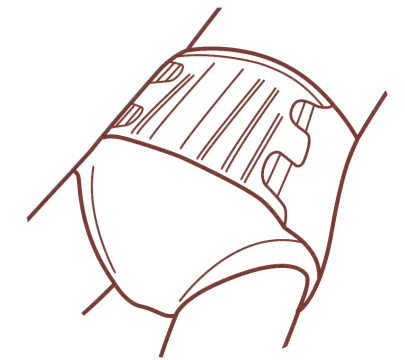


## 12時間以上使用する時 ▶ 「肌ケア」+「パッド洗浄」

装着後、12 時間経過したら行ってください。

「パッド洗浄」の方法 ※尿吸引パッドと本体は繋いだままで行います。

- ①上記①～④の肌ケアを行います。
- ②「手動 入/切」ボタンを押します。
- ③お湯またはおしり洗浄液をパッドの吸収ゾーンにかけます。  
※吸引は自動で停止します。
- ④洗浄したパッドを装着します。

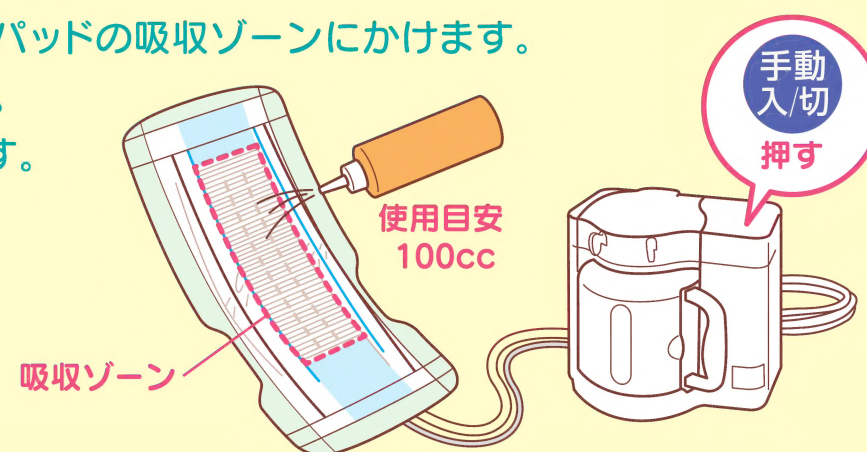


注意事項

尿吸引パッドの汚れが著しい場合、または汚れが落ちない場合は新しい尿吸引パッドに交換してください。



## 「パッドの外し方」

センサーを外すとアラームが鳴ります。🔔

### ①接続ケースを開けます。

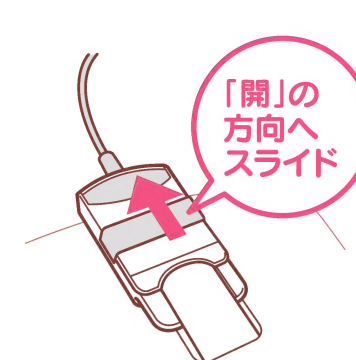

### ②尿吸引チューブを引き抜きます。

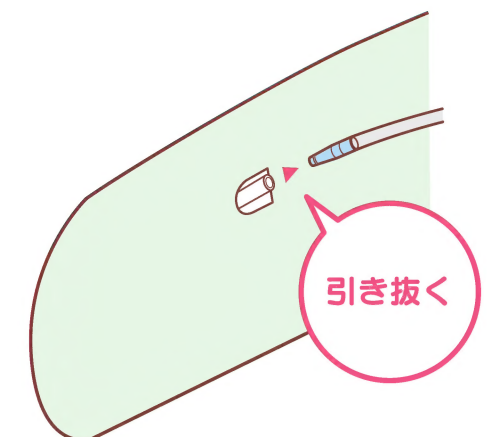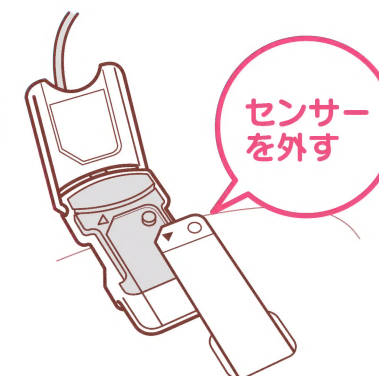

注意事項

チューブ内に尿が残っていることがあります。チューブを外す際、飛び散りなどにご注意ください。  
チューブを外して保管する場合、チューブ先端を本体より低い位置に置かないでください。チューブ内に尿が残っている場合、先端より流れ出る事があります。  
※保管の際はチューブ先端を尿吸引口が本体側面のチューブホルダーへ入れてください。



# 「本体のお手入れ」

長時間使用しない場合は、汚れがたまりやすいので、しっかりケアしてください。

- 本体と電源アダプターには水をかけたり、洗ったりしないでください。(漏電・感電・故障の原因)
- お手入れなどの際に洗剤や薬品等を使用する場合は、必ず本体取扱説明書に従ってご使用ください。


## ① 尿タンク・チューブ等のお手入れ (パッド交換時毎回)

### 1 尿タンク

尿を捨て、水またはぬるま湯ですすぎ洗いしてください。




本体フタをつまんで開く

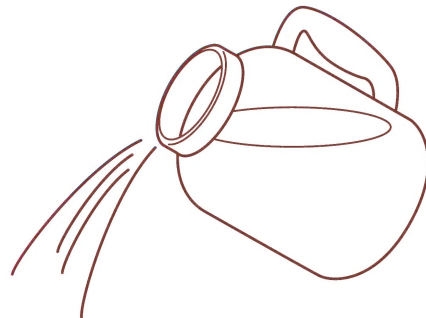

### 2 チューブセット

本体の「手動 入/切」ボタンを押し、適当な容器に入れた水またはぬるま湯を尿吸引チューブ先端から吸引させてください。

水、または  
ぬるま湯

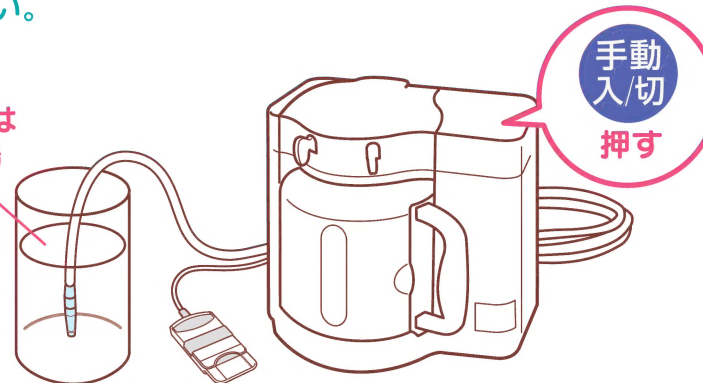


手動  
入/切  
押す

### 3 パッキン

本体フタ裏側の2箇所と尿タンク上面の汚れを、お手持ちの綿棒やティッシュなどでふき取ります。

綿棒や  
ティッシュ

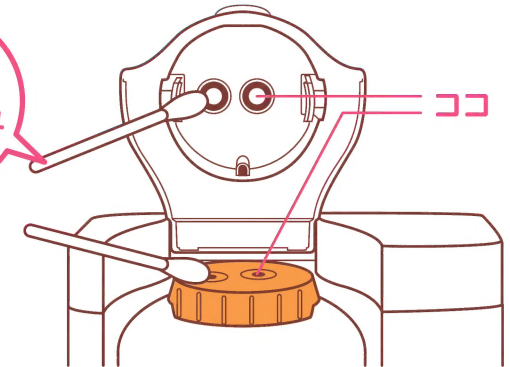


ココ

## ② 水抜きタンクのお手入れ (目安：週一回)

※水抜きタンクは尿吸引口ボ本体の裏側にあります。 ※水量をこまめに点検して水抜きタンクを空にしてください。

### 1 水抜きタンクの取り外し方法

①タンク上面の手前にあるチューブを引き抜きます。

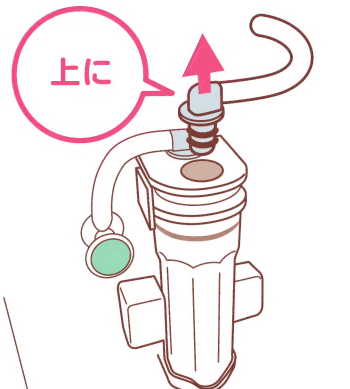


上に

②緑色のジョイントを引き抜きます。



手前に

③タンクを引き抜きます。

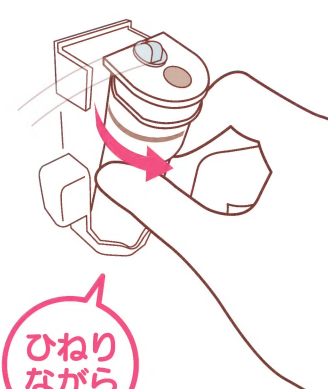


ひねり  
ながら

④タンクのフタを上を開け、たまった水を捨てます。

⑤水またはぬるま湯ですすぎ洗いをしてよく乾かしてください。


### 2 水抜きタンクのセット方法

①凹凸を合わせ、フタを閉めます。

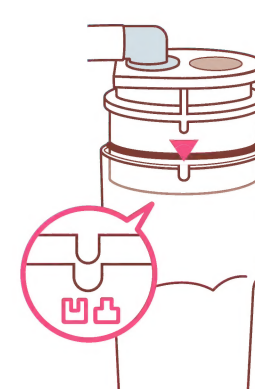


凹凸

②下部から先に入れ、押し込みます。

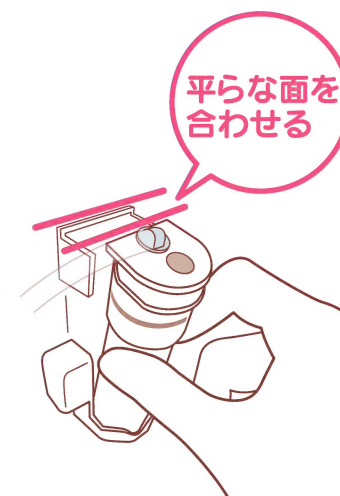

平らな面を  
合わせる

③チューブを元通りに差し込みます。

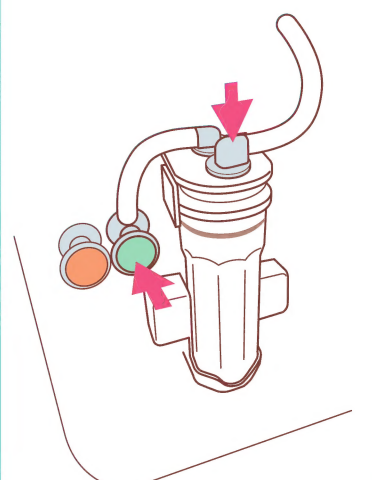

## ③ その他の部品のお手入れや詳細などは、本体取扱説明書をご覧ください